


Prélèvement d'échantillon par écouvillonnage vaginal effectué par la patiente

1


Lavez-vous les mains avant de commencer et déshabillez-vous sous la taille. Ouvrez l'emballage de prélèvement individuel **A** qui contient le tube de réactif de transport d'écouvillon Xpert® fermé par un bouchon rose et l'écouvillon de prélèvement emballé individuellement. Mettez le tube de côté avant de collecter l'échantillon.

Jetez l'écouvillon de plus grande taille **B**.

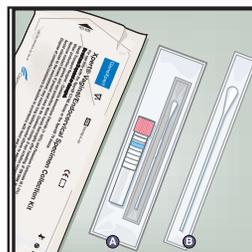

5


Tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. Assurez-vous que l'écouvillon touche la paroi du vagin de manière à ce que l'écouvillon absorbe les sécrétions. Sortez l'écouvillon et continuez à le tenir de la main.

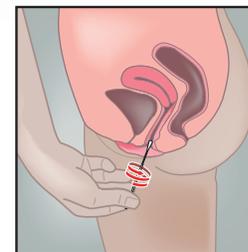

2

Retirez le film de protection de l'emballage de l'écouvillon de prélèvement.

Sortez l'écouvillon en prenant soin de ne pas toucher son extrémité et en évitant de le déposer sur la paillasse. Si l'extrémité souple a été touchée, si l'écouvillon a été déposé ou est tombé, demandez un nouveau kit de collecte.

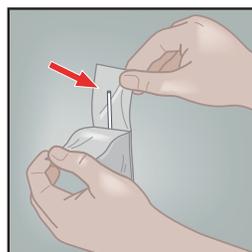


6




En tenant l'écouvillon dans la même main, dévissez le bouchon du tube de réactif de transport d'écouvillon Xpert. Ne déversez pas le contenu du tube. Si le liquide contenu dans le tube a été déversé, demandez un nouveau kit de collecte. Déposez immédiatement l'écouvillon de prélèvement dans le tube de réactif de transport.

ATTENTION : si du liquide contenu dans le tube s'est répandu sur la peau, lavez la zone affectée à l'eau et au savon. Si du liquide contenu dans le tube est entré au contact des yeux, rincez immédiatement les yeux à l'eau. Consultez le médecin, l'infirmier/ère ou le prestataire de soins en cas d'apparition d'une irritation. Si du liquide contenu dans le tube a été déversé, le résultat du test pourrait être non valide. Ne pas ingérer.

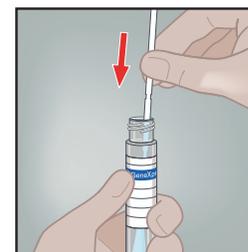


3

Tenez l'écouvillon dans la main en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne de cassure.

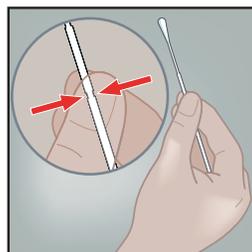

7

Après avoir repéré la ligne de cassure sur la tige de l'écouvillon de prélèvement, cassez délicatement la tige de l'écouvillon contre le côté du tube au niveau de la ligne de cassure. Si nécessaire, tournez doucement la tige de l'écouvillon pour la casser. Jetez la partie supérieure de la tige de l'écouvillon. Évitez d'éclabousser le contenu sur la peau. Lavez-vous au savon et à l'eau en cas d'exposition.

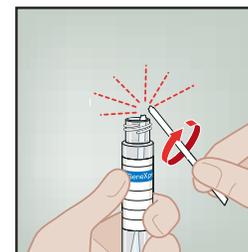

4

Introduisez avec précaution l'écouvillon dans votre vagin, d'environ 5 cm à l'intérieur de l'ouverture du vagin.



8

Rebouchez le tube de transport et serrez bien le bouchon.

Restituez le tube en suivant les instructions du médecin, infirmier/ère ou prestataire de soins.

Remarque : le prestataire de soins doit retourner le tube ou l'agiter délicatement 3-4 fois pour éluer le matériau de l'écouvillon. Évitez la formation de mousse. Étiquetez le tube de transport avec les informations d'identification de l'échantillon, notamment la date du prélèvement, comme requis.

